


# Siebkörbe

3mach<sup>®</sup>-Siebkörbe sind mit bekannten Siebkörben nicht zu vergleichen. Diese neuartigen Körbe sind ultraleicht und bieten mehr Flexibilität, mehr Lagerungssicherheit und ermöglichen ein MEHR an Kosteneinsparung als bekannte Siebkörbe.



3mach<sup>®</sup>-Siebkörbe sind **stapelbar**, **änderbar**, **stoßgedämpft** und passen ineinander sowie übereinander. Aus zwei Siebkörben entsteht ein in der Höhe verstellbarer Siebkorbbehälter.

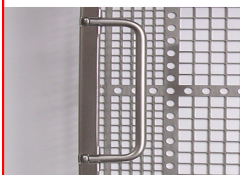

Alle Siebkörbe besitzen ein Mischgitter mit einer Organisationsstruktur und sind **individuell ausbaufähig** mit 3mach<sup>®</sup>-Noppenbändern, -Silikonringen, -Spüleleisten oder 3mach<sup>®</sup>-Stufenschrauben.



3mach<sup>®</sup>-System-Siebkörbe besitzen „**open windows**“ durch biegbare Formelemente zur Verbesserung der Reinigungsleistung. Durch Aufstellen und Umbiegen der Formelemente entstehen Durchbrüche im Boden und im Wandbereich.




**Formelemente** dienen zur individuellen Fixierung von Silikonteilen und Unterteilung der Siebkörbe. Große, kleine oder unförmige Instrumente bis hin zu Motoren können so stoßgedämpft und sicher fixiert oder gelagert werden.

## Siebkorbkombinationen



## Der bewegliche Bügel mit definierten Stellungen

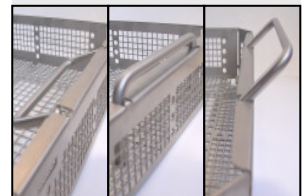


# Siebkörbe



### Weitere Vorteile von 3mach<sup>®</sup>-Siebkörben

- mit einer Weichverpackung kombinierbar
- besonders stabile Schweißnähte
- auswechselbare Bügel mit drei Stellungen
- mattierte und passivierte Oberflächenstruktur
- nachträglich mit einem Verschluss kombinierbar
- Stülpedeckelanordnung in der Höhe änderbar

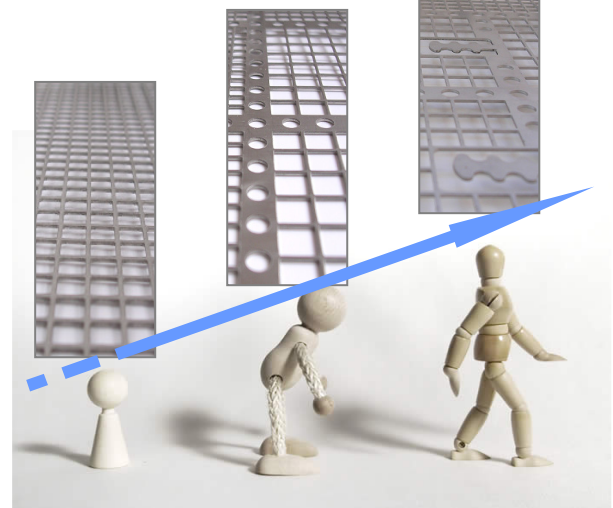

### 3mach®-Standardkörbe mit Zubehör



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmaße* (mm)
1000712-1	½ -Standard-Korb, variable Bügel, Pufferelemente	240 x 250 x 45
1000714-1	DIN-Standard-Korb, variable Bügel, Pufferelemente	480 x 250 x 45
1000716-1	Standard-Korb, variable Bügel, Pufferelemente	540 x 250 x 45
1000720-1	½ -Standard-Außenkorb, Pufferelemente	244 x 254 x 45
1000724-1	DIN-Standard-Außenkorb, Pufferelemente	484 x 254 x 45
1000726-1	Standard-Außenkorb, Pufferelemente	544 x 254 x 45

\*Alle Angaben in Länge x Breite x Höhe

### 3mach®-System-Körbe



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmaße* (mm)
1000730-1	¼ -System-Korb**, variable Bügel, Pufferelemente	100 x 248 x 45
1000731-1	Kleiner System-Korb, variable Bügel, Pufferelemente	110 x 260 x 38
1000732-1	½ -System-Korb, variable Bügel, Pufferelemente	240 x 250 x 45
1000733-1	½ -System-Korb, variable Bügel, Pufferelemente (Wagner Container)	240 x 240 x 45
1000734-1	DIN-System-Korb, variable Bügel, Pufferelemente	480 x 250 x 45
1000736-1	Dental-System-Korb, variable Bügel, Pufferelemente	160 x 260 x 38
1000740-1	¼ -System-Außenkorb**	104 x 252 x 40
1000741-1	Kleiner System-Außenkorb	114 x 264 x 33
1000746-1	Dental-System-Außenkorb, Pufferelemente	164 x 264 x 38


\*\* Produkt nur auf Anfrage

\*Alle Angaben in Länge x Breite x Höhe

#### Leichte und flexible Körbe mit System

3mach®-System-Körbe besitzen biegbare Formelemente zur Befestigung von Silikonteilen, fungieren als Raumteiler oder können zur Höhenbegrenzung eingesetzt werden.

### 3mach®-Korbzubehör

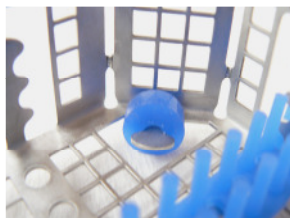

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmaße (mm)
1020154	Pufferelement (Scheiben mit Ø 4 mm Loch, blau)	Ø 14 x 5
1020182-1	Verschluss für Siebkörbe	M4
1020971	Bügel 67 (L), M4 Schrauben	67 x 36
1020972	Bügel 105 (L), M4 Schrauben	105 x 40

Weiteres Korbzubehör finden Sie im Bereich der Gestelle und Komponenten!



### 3mach®-Siebkorbbehälter

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmaße* (mm)
1000771-1	System-Behälter, variable Bügel, Pufferelemente	114 x 264 x 45
1000772-1	1/2 -Standard-Behälter, variable Bügel, Pufferelemente	244 x 254 x 47
1000773-1	1/2 -System-Behälter, variable Bügel, Pufferelemente	244 x 254 x 47
1000773-2	1/2 -System-Behälter, variable Bügel, Pufferelemente (Wagner)	244 x 244 x 47
1000774-1	DIN-Standard-Behälter, variable Bügel, Pufferelemente	484 x 254 x 47
1000775-1	DIN-System-Behälter, variable Bügel, Pufferelemente	484 x 254 x 47
1000776-1	Dental-System-Behälter, variable Bügel, Pufferelemente	164 x 264 x 45

\*Alle Angaben in Länge x Breite x Höhe

**Hinweis:**

System-Behälter besitzen biegbare Formteile und bestehen aus zwei Teilen, einem Systemkorb und einem System-Außenkorb als Deckel.

#### 3mach®-Siebkorbbehälter

3mach®-Siebkorbbehälter sind besonders leicht und können mit Weichverpackungen kombiniert werden.

Die Variabilität des Systems ermöglicht den Einbau eines wartungsfreien Verschlusses.

Stülpedeckel sind voll funktionsfähige Siebkörbe und brauchen kein Verschlusssystem.

3mach®-Siebkorbbehälter sind stoßgedämpft und brauchen keine Bügel im Deckel.

3mach®-System-Siebkorbbehälter besitzen Funktionsteile zum Fixieren von Silikonteilen oder dienen als Halterungsteile für Instrumente.

#### Optimal kombinierbar mit 3mach®-Produkten!

- Silikonknochenbänder
- Flex-Halterungsbänder
- Silikonringe
- Silikonpuffer
- Stufenstifte
- Spülmodule
- Gestelle
- Gestellkomponenten
- Bügel